

TRAXODENT


paszta alapú vérzéscsillapító, sulcustágító rendszer



A vérzéscsillapítás és a barázdatágítás többé nem jelent gondot!

A Traxodent egy barázdatágító és vérzéscsillapító rendszer, amely alkalmazható lenyomatvételt, becementezést, adhezív technikákat és bármilyen eljárást megelőzően, amikor vérzéscsillapításra, vagy barázdatágításra van szükség. A készítmény 15% alumínium-kloridot tartalmaz, amely bizonyítottan hatékony vérzéscsillapító.

Az abszorpciós (nedvesség elnyelő) képességű paszta elmozdítja a lágy szövetet. Az alumínium-kloriddal együtt hatva hozza létre a barázdatágítást. A szabad folyadékokat a Traxodent magába szívja, ahogy az ínybarázdába hatol. Két perc elteltével a készítményt leöblítve, nyitott, jól definiált peremet hoz létre.

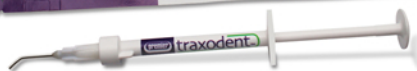

A Traxodent használata jelentős előnyökkel jár:


- kiszámítható végeredmény
- hatékony vérzéscsillapítás és retrakció
- kevesebb hibás lenyomat
- rövidebb szék idő
- minimális szövetsérülés
- nagyobb kényelem a pácienseknek

Kiszerelés:


7 db 0,7 g-os fecskendő, 15 db hajlítható végződés

Egyszerű használat

Távolítsa el a védőkupakot. Csavarja a helyére az adagoló végződést és hajlítsa meg a kívánt formára.

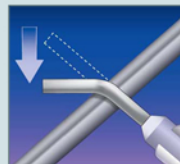


Tartsa a végződést a sulcus felszínéhez, párhuzamosan a lecsiszolt fog függőleges peremével. Vigyázzon, ne hogy felsértse az ínybarázdát.

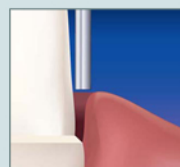

A megfelelő mennyiségű anyagot lassan fecskendezze az ínybarázdába.



Helyezze fel a retrakciós sapkát, ezáltal a Traxodent bejut a barázda aljára és maximális tágítást tesz lehetővé.

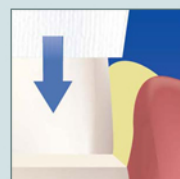

Kérje meg a beteget, hogy harapjon erre a sapkára és tartsa a helyén két percig.



Vízszaggal igyekezzon eltávolítani a teljes mennyiségű Traxodent pasztát. Az eredmény egy száraz, tág barázda lesz.

